



INFORMATION À L'ATTENTION
DES PARENTS DES ENFANTS MONITORISÉS

Service de Pédiatrie

VOTRE BÉBÉ ET SON MONITEUR SMART

Unité du sommeil du nourrisson



Sites
DINANT
SAINTE-ELISABETH



chuucnamur.be



CHU
— UCL —
NAMUR

ETAPE 1 : LE PLACEMENT DES ÉLECTRODES

Pour vous aider dans la pose des électrodes sur votre enfant, nous vous invitons à vous référer au schéma ci-après.

E = Électrode

1. Placez-les à hauteur des mamelons vers l'extérieur pour les électrodes rouge et jaune. L'électrode noire se place tout autour de l'ombilic.



2. Veillez à ne pas ajouter d'huile dans le bain. Cela rendrait difficile l'adhésion des électrodes à la peau.

3. En cas d'allergies ou rougeurs à l'emplacement des électrodes, veuillez prévenir l'équipe.

4. Les électrodes se changent lors du bain et plus régulièrement lors de fortes chaleurs. N'hésitez pas à les placer au frigo si elles se décolle plus souvent.

ROUGE OU
BLANCHE À LA
DROITE DU BÉBÉ

E

JAUNE OU
VERTE À LA
GAUCHE DU BÉBÉ

E

NOIRE AUTOUR
DE L'OMBILIC
(NOMBRIL)


E

ÉTAPE 2 : L'UTILISATION DU SMART MONITEUR 2

A la différence du monitoring du centre néonatal, le Smart Moniteur 2 fonctionne uniquement avec des témoins lumineux (aucun chiffre).



La connexion des électrodes au câble du monitoring

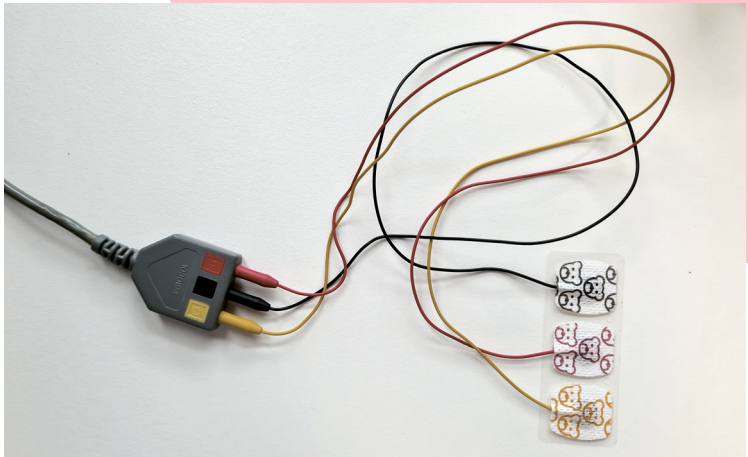

Mise en marche du moniteur

Poussez sur le bouton ON/OFF (face supérieure).

L'appareil se teste :

- tous les témoins s'allument puis s'éteignent ;
- une alarme sonore courte et continue retentit.



Arrêt du moniteur

Appuyez simultanément sur le bouton ON/OFF gris et le bouton bleu (reset).



Lâchez le bouton ON/OFF en premier puis le bouton bleu en second lieu.

LES ICÔNES



Témoin lumineux **vert** du rythme cardiaque.



Témoin lumineux **vert** du rythme respiratoire.



Témoin lumineux **rouge** d'alarme de tachycardie.



Témoin **rouge** d'alarme de bradycardie
(= rythme cardiaque inférieur à la norme définie par le pédiatre).




Témoin lumineux **rouge** d'apnée
(= pause respiratoire supérieure à 20 secondes).



Témoin **vert** de fonctionnement.



Témoin **vert** du chargeur :
 › si le témoin clignote, la batterie se recharge ;
 › si le témoin vert est permanent, la batterie est rechargée.

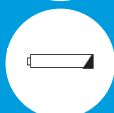

Le témoin **orange** clignote quand la batterie est déchargée.
 Dès que le témoin de la batterie s'allume, il faudra 6h de fonctionnement sur secteur pour optimiser la batterie (autonomie de 15h).



Le témoin est **orange** quand la mémoire est remplie à 80%.
 Veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous afin de vider la mémoire au +32 (0)81 70 23 75 ou +32 (0)81 70 23 24.



Témoin **orange** de déconnexion (électrode ou câble).

LES ALARMES : COMMENT RÉAGIR ?

Alarme sonore discontinue + témoin de bradycardie, de tachycardie ou d'apnée (témoin rouge)

- Observez votre bébé, si nécessaire agir (le stimuler, dégager ses voies respiratoires, appeler le 112 en cas d'urgence).
- L'alarme sonore s'éteint dès que les fréquences cardiaques ou respiratoires se sont normalisées.
- Appuyez sur le bouton bleu (reset) pour éteindre le témoin lumineux.
- Ne jamais secouer votre bébé.

Alarme sonore continue + témoin de déconnexion (témoin orange)

- Éteignez le moniteur et remplacez l'électrode.
- L'alarme sonore s'éteint lorsque le problème est résolu.
- Lorsque l'évènement est résolu, appuyez sur le bouton bleu (reset).

Alarme sonore continue + témoin batterie (témoin orange)

- Rechargez rapidement.
- Si elle est significative, notez l'alarme dans le carnet.

Alarme sonore continue + témoin mémoire

- Appuyez sur reset et faites vider la mémoire du moniteur.





INFORMATIONS UTILES POUR NOUS CONTACTER

Durant les jours ouvrables, entre 9h et 16h.

MARYSE DEJOSÉ, INFIRMIÈRE EN CHEF

+32 (0)81 70 23 24

CHRISTELLE FAMERÉE, SECRÉTAIRE

+32 (0)81 70 23 75

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

+32 (0)81 72 05 89

Si le problème est technique, formez le +32 (0)81 72 04 92. Il s'agit du numéro d'appel du service de Pédiatrie du site de Sainte-Élisabeth ; il est joignable 24h/24 et 7 jours/7.

Comment nous rencontrer ?

Rendez-vous au niveau 4 de l'aile M. Prenez à gauche en sortant de l'ascenseur (suivre les flèches roses).

Lecture et rencontre aux consultations de Pédiatrie (aile B, niveau 3).
Un contact téléphonique préalable est nécessaire.

UNE ALARME S'ACTIVE SUR LE MONITEUR : FORMULAIRE À COMPLÉTER

Uniquement pour les alarmes qui vous inquiètent.

❖ NOTEZ LA DATE ET L'HEURE

❖ NOTEZ LA NATURE (CARDIAQUE OU RESPIRATOIRE)

❖ NOTEZ CE QUE VOUS OBSERVEZ CHEZ VOTRE BÉBÉ ENDORMI

Exemples : la coloration de son visage (blanc, pâle, transpirant, cerné, etc.), son attitude pendant son sommeil, son activité (sucé sa tétine, soupire, etc.).

❖ NOTEZ LE GESTE QUE VOUS AVEZ FAIT OU LA STIMULATION

Exemples : stimuler légèrement, petite caresse, etc.

❖ NOTEZ LES CIRCONSTANCES SI CELLES-CI SONT
INHABITUELLES POUR L'ENFANT

Exemples : vaccins, rhume, déménagement, fête familiale, etc.

❖ NOTEZ R.A.S. (RIEN À SIGNALER) S'IL N'Y A RIEN DE PARTICULIER

Le carnet d'alarmes qui inquiètent

[illegible]

INFORMATIONS



UNITÉ DU SOMMEIL DU NOURRISSON

SERVICE DE PÉDIATRIE

Site de Sainte-Elisabeth

- 📍 Place Louise Godin, 15 - 5000 Namur
- 👤 Secrétariat : +32 (0)81 70 23 75

POUR ALLER PLUS LOIN

Formations de la Croix-Rouge
Initiation à la réanimation pédiatrique

> <https://formations.croix-rouge.be/formations-particuliers/rea-bebe-initiation-a-la-reanimation-pediatrique.html>