1. Appuyer sur le bouton « Accueil »pour allumer le lecteur.

Si vous utilisez le lecteur pour la première fois, suivez les consignes pour définir la date, l'heure et la plage cible de vos taux de glucose.

2. Toucher « Démarrer le nouveau capteur ».







3. Maintenir le lecteur ou la zone NFC du téléphone à moins de 4cm du capteur pour le scanner. Le capteur peut être utilisé pour vérifier votre taux de glucose au bout de 60 minutes.

#### Réglage des alarmes



Touchez pour accéder aux alarmes, rappels et autres paramètres du lecteur.

Votre alarme hypo est réglée à

Votre alarme hyper est réglée à

# Interprétation des résultats de glucose du capteur et encodage des doses d'insuline

# Taux de glucose actuel Taux de glucose lors de votre dernier scan.

#### Ajouter des remarques

Touchez pour encoder des commentaires tels que: repas, doses d'insuline, activité physique.

Flèche de tendance

- Graphique du taux de glucose Graphique avec votre résultat actuel et les 8 dernières heures enregistrées.

### INFOS

#### Service Diabétologie

Site de Godinne

Avenue Dr Gaston Thérasse, 1 - 5530 Yvoir +32 81 42 24 17 ou 32 87

#### Service Diabétologie

# L'auto-contrôle interstitiel via freestyle libre 2

**9** Godinne

Informations à l'attention des patients

# **CE QUI EST CONSEILLÉ**

## La durée de vie d'un capteur est de 14 jours



 Vérifier le temps restant à l'écran.



Expiration capteur dans: 2 jours

#### Sites



- Arrière du bras
- ► Sur une peau saine
- Désinfecter et sécher le site

# Examens, programmes (IRM, SCANNER)



- Eviter de placer un capteur en cas d'IRM ou scanner.
- Réaliser des tests au bout des doigts.

#### **Batteries**





Vérifier l'état de charge







# **TECHNIQUE DE POSE DU CAPTEUR**

#### Lecteur ou GSM



#### Patch et applicateur



# **EN PRATIQUE**

## Les étapes




- 1. Sélectionner un site à l'arrière du bras.
- 2. Désinfecter le site à l'alcool et laisser sécher.

3. Retire l'opercule du patch du capteur.



4. Dévisser le bouchon de l'applicateur.

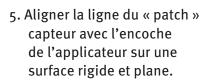



- 6. Appuyer fermement.
- 7. Sortir l'applicateur de la partie « patch ».
- 8. Placer l'applicateur sur le site choisi et appuyer fermement.
- 9. Attendre quelques secondes et retirer doucement l'applicateur.

10. Vérifier la fixation du capteur en appuyant.



11. D

11. Démarrer votre capteur avec le lecteur ou le smartphone.